



AED-Alert™ 2.0

Sistema di Gestione remota DAE

Connessi & Sicuri

mindray
healthcare within reach

Sommario

- 1 Informazioni dettagliate di ogni apparecchio
- 2 Visibilità completa di tutti gli apparecchi
- 3 Comunicazione 4G con tecnologia IoT
- 4 Soluzione sicura



Sommario

1 Informazioni dettagliate di ogni apparecchio

Manutenzione giornaliera

- Stato operativo
- Controllo durata degli accessori
- Allarme posizione
- Allarme e dati di soccorso
- Gestione gruppi misti di DAE

2 Visibilità completa di tutti gli apparecchi

3 Comunicazione 4G con tecnologia IoT

4 Soluzione sicura



Manutenzione giornaliera

Mindray IoT - AED ALERT

https://aedalert.mindray.com

mindray 迈瑞

Home Device Mgmt. Event Mgmt. Pos. Offset Permission Mgmt. System Mgmt.

Current Pos. : Device Mgmt. > Device Details

Device SN: AE7-97000072 Device Model: All Branch: All Customer Name: Enter Search Reset&Return

Basic Info Warning Fault Self-test report Device Log Rescue summary Rescue log Power on/off log

Basic Info



Device SN : AE7-97000072
Device Model : BeneHeart C2

[More Info](#)

Device Status



Normal

Battery Status



Remaining capacity 98%

Last Battery Replacement Time : 2019-08-16

Pads Status



21days

Pads expire on 2019-10-01

Pos. Status




Normal

Network Status



Good Signal

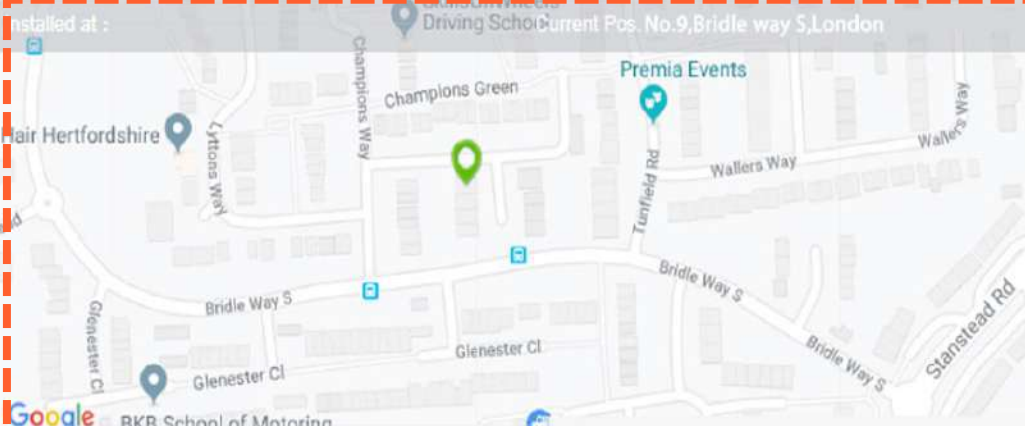Installed at : 

Driving School Current Pos. No.9,Bridle way S,London

Premia Events

Champions Green

Champions Way

Waller's Way

Tunfield Rd

Bridle Way S

Glenester Cl

BKB School of Motoring



Delete Image



mindray

AED

Upload Image

Manutenzione giornaliera

Informazioni stato operativo

Device SN : AE7-97000072
Device Model : BeneHeart C2

Device Status

Normal

Self-Test Result Details- (Device SN:LY-WDF-002)

Test Item	Test Result	Remarks
Control module	Pass	
ECG module	Pass	
Treatment module	Pass	
1J charge/discharge	Pass	
Battery	Pass	Battery SN:HY09191450347 Battery Validity(Year/Month):202404 Remaining Power:6054mAh
Pads	Pass	Validity:2024-09-12
Signal type:4G	Signal	RSRP:-84 dBm

Close

Delete Image Upload Image

Manutenzione giornaliera

Mindray IoT - AED ALERT

https://aedalert.mindray.com

mindray 迈瑞

Home Device Mgmt. Event Mgmt. Pos. Offset Permission Mgmt. System Mgmt.

Controllo durata degli accessori

Basic Info Warning Fault Self-test report Device Log Rescue summary Rescue log Power on/off log

Basic Info

Device SN : AE7-97000072
Device Model : BeneHeart C2
More Info

Device Status

Remaining capacity of battery

Battery Status

Remaining capacity 98%
Last Battery Replacement Time : 2019-08-16

Pads Status

21days
Pads expire on 2019-10-01

Pos. Status

Remaining time & expiry date of pads

Network Status

Good Signal

Interact Map

Driving School from Local Police Academy, London

Champions Green

Premia Events

Waller's Way

Tunfield Rd

Bride Way S

Glenester Cl

Stamstead Rd

Google BKB School of Motoring

Delete Image


mindray

AED

Upload Image

Manutenzione giornaliera

Controllo durata degli accessori

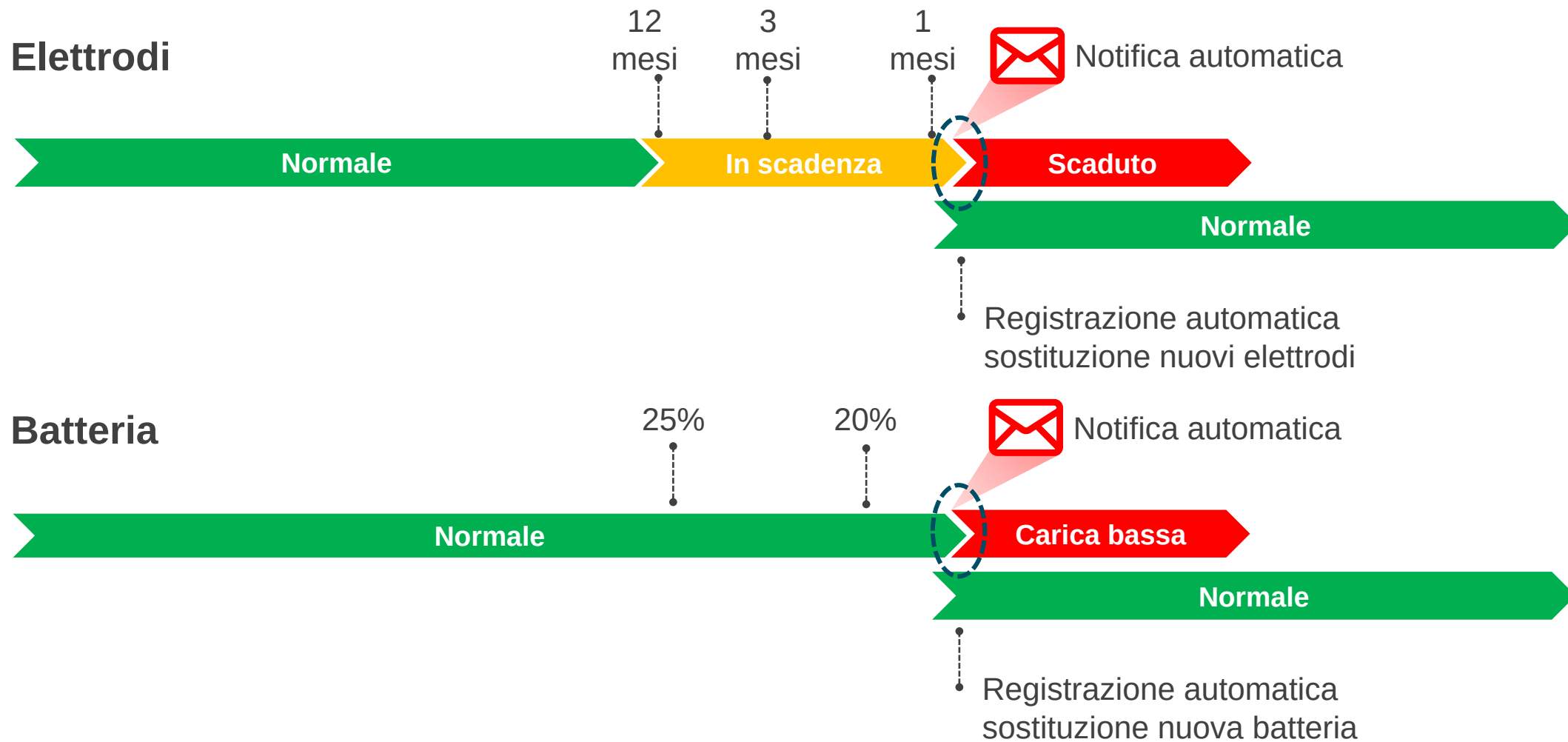

Manutenzione giornaliera

Stato posizione

mindray 迈瑞

Home Device Mgmt. Event Mgmt. Pos. Offset Permission Mgmt. System Mgmt.

Current Pos. Device Mgmt. Device Details

Device SN: AE7-97000072 Device Model: BeneHeart C2

Basic Info Warning Fault Self-test report Device Log Rescue summary Rescue log Power on/off log

Basic Info

Device SN : AE7-97000072
Device Model : BeneHeart C2
[More Info](#)

Device Status

Normal

Battery Status

Remaining capacity 98%
Last Battery Replacement Time : 2019-08-16

Pads Status

21days
Pads expire on 2019-10-01

Pos. Status

Normal

Network Status

Good Signal

Installed at :
Driving School Current Pos. No.9,Bridle way S,London

Champions Green
Champions Way
Premia Events
Tunfield Rd
Wallera Way
Bridle Way S
Glenester Cl
Starstead Rd

Google BKB School of Motoring

Delete Image

Upload Image

AED

Manutenzione giornaliera

Mindray IoT - AED ALERT

https://aedalert.mindray.com

mindray.com

Home Device Mgmt. Event Mgmt. Pos. Offset Permission Mgmt. System Mgmt.

Allarme posizione

Model All Branch All Customer Name Enter Search Reset&Return

Basic Info Warning Fault Self-test report Device Log Rescue summary Rescue log Power on/off log

Basic Info Device Status Battery Status Pads Status Pos. Status Network Status

Device SN : AET-97000072 Device Model : Banelheart CS21days Pads expire on 2019-10-01

Pos. Status

Loc. Offset

Good Signal


mindray AED

Upload Image

Device Status

Notifica automatica

Quando il DAE **viene spostato** dalla posizione predefinita

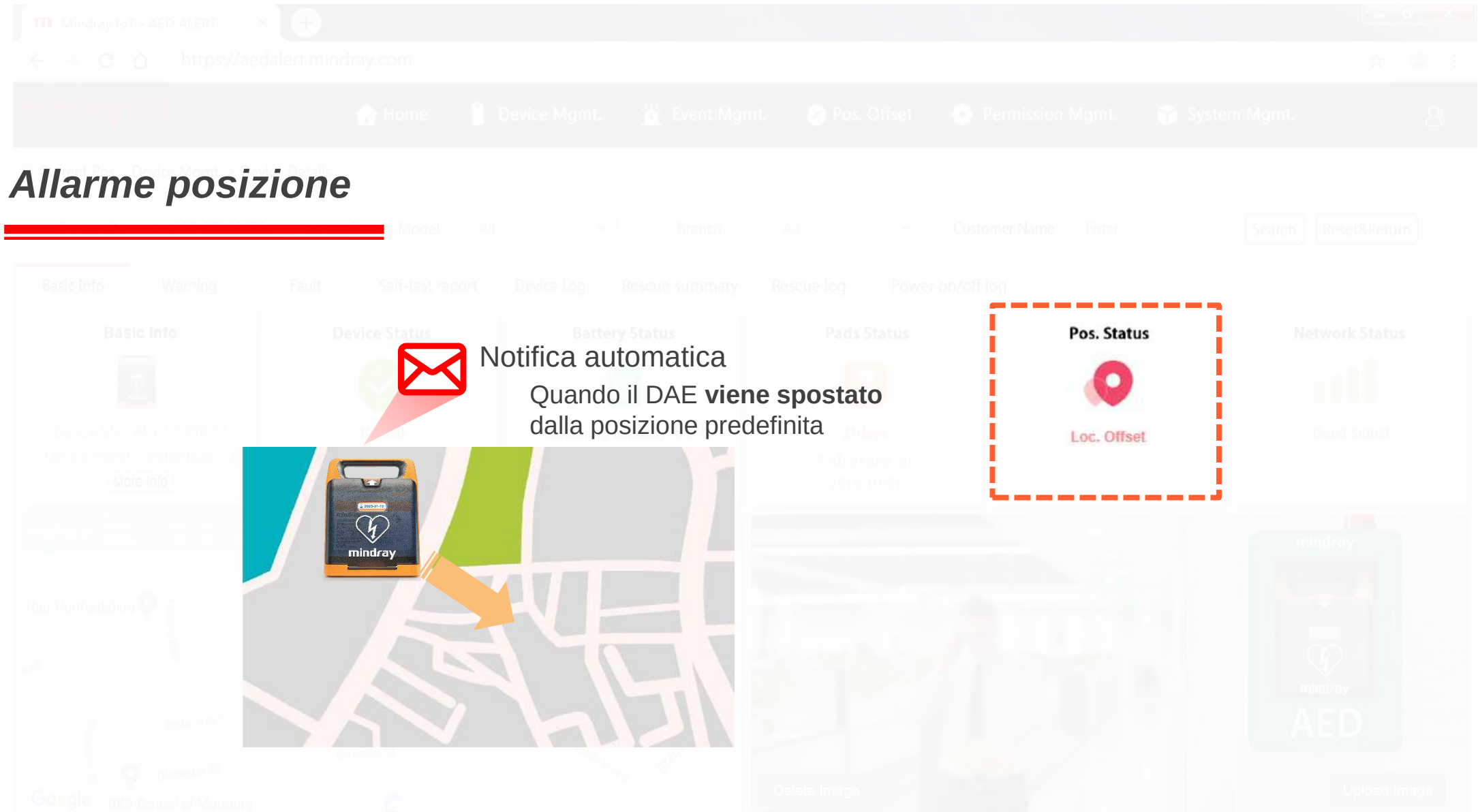

Manutenzione giornaliera

Mindray IoT - AED ALERT

https://aedalert.mindray.com

mindray 迈瑞

Home Device Mgmt. Event Mgmt. Pos. Offset Permission Mgmt. System Mgmt.

Allarme posizione


Device Model: All Branch: All Customer Name: Enter Search Reset&Return

Basic Info Warning Fault Self-test report Device Log Rescue summary Rescue log Power on/off log

Basic Info	Device Status	Battery Status	Pads Status	Pos. Status	Network Status
 Device ID: 2019-08-10 More Info	 Normal	 Remaining Capacity: 2019-08-10	 21days Pads expired: 2019-10-01	 Normal	 Good Signal

Posizione mappa e descrizione del luogo
consentono di arrivare rapidamente

La foto della postazione
facilita la rapida identificazione

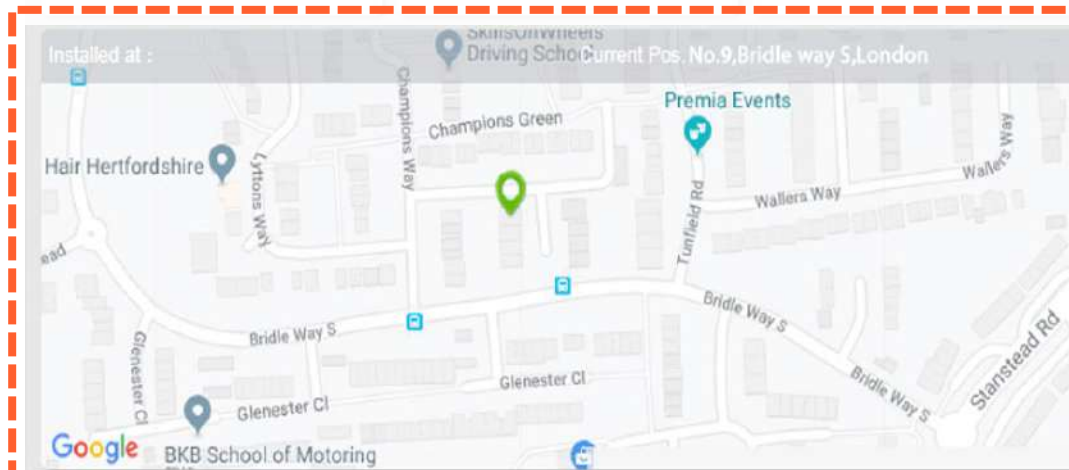

Allarme e dati di soccorso



Notifica automatica

-quando il DAE viene utilizzato

Dati di soccorso

- Orario all'accensione
- Orario allo spegnimento
- Durata CPR
- Scariche erogate



Gestore del DAE /
Manutentore

Rescue Summary Rescue Log Power-On/Off Log

~ yy-mm-dd Search Reset & Return

n	Rescue Time(s)	CPR Duration(s)	Shocks	Received Time(Berlin T...
00.08	116	90	1	2019-08-28 11:56:20
00.08	189	82	1	2019-08-28 11:15:19

Gestione di un gruppo misto di DAE

Device SN: Zoll-57254453	Device Model: AED plus
Branch:	Asset SN: ZC-172574568
Client Name (CRM):	• Manually typing in device & readiness information
Client Name: William Huang	Device Admin:
Inst. Time: 2019-08-25	Self-test Period (Day):
Self-test sending cycle (Day):	Last Upload Time: Auto-alert -when pads expired
Device State: Fault Normal Fault ✓ ✕	Pads Service Life: 2021-08-11
Current Bound Agent: Fault	

Email di allarme



Notifica automatica

Dear user:

Your AED device failed self-test at 00:12:28 2019-08-30!

Device SN	Device Model	Installation loc.	Device State
1 ym-wdf-01	BeneHeart C2	Hai Si Lu, Nanshan Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China	Self-test failed,Fault Code:442;Detailed Failure Module:Main control module.

Access <https://aedalert.mindray.com> for details and conduct onsite inspection in time.

Tips:

- (1) View and manage device anomalies in time to avoid emergency rescue failure due to untimely anomaly management.
- (2) Remember the SN of your AED device to make sure you have follow-up service.
- (3) The AED device performs self-test periodically based on the setting. Once any device anomaly is found, it immediately notifies you by SMS message and email until you rectify the anomaly and the self-test succeeds.
- (4) Replacement parts, accessories, and consumables must be original or Mindray-approved.
- (5) In special cases, contact your dealer or Mindray CSC.
- (6) Follow the product manual for detailed operations. For more guidance on AED O&M, scan the QR code on the right to follow the Mindray CS video and watch the AED O&M video.

Sommario

1 Informazioni dettagliate di ogni apparecchio

2 Visibilità completa di tutti gli apparecchi


- Panoramica e Visualizzazione stato operatività
- Allarmi accessori e garanzia organizzati per priorità
- Statistiche per riesame periodico

3 Comunicazione 4G con tecnologia IoT


4 Soluzione sicura



Visibilità completa di tutti gli apparecchi

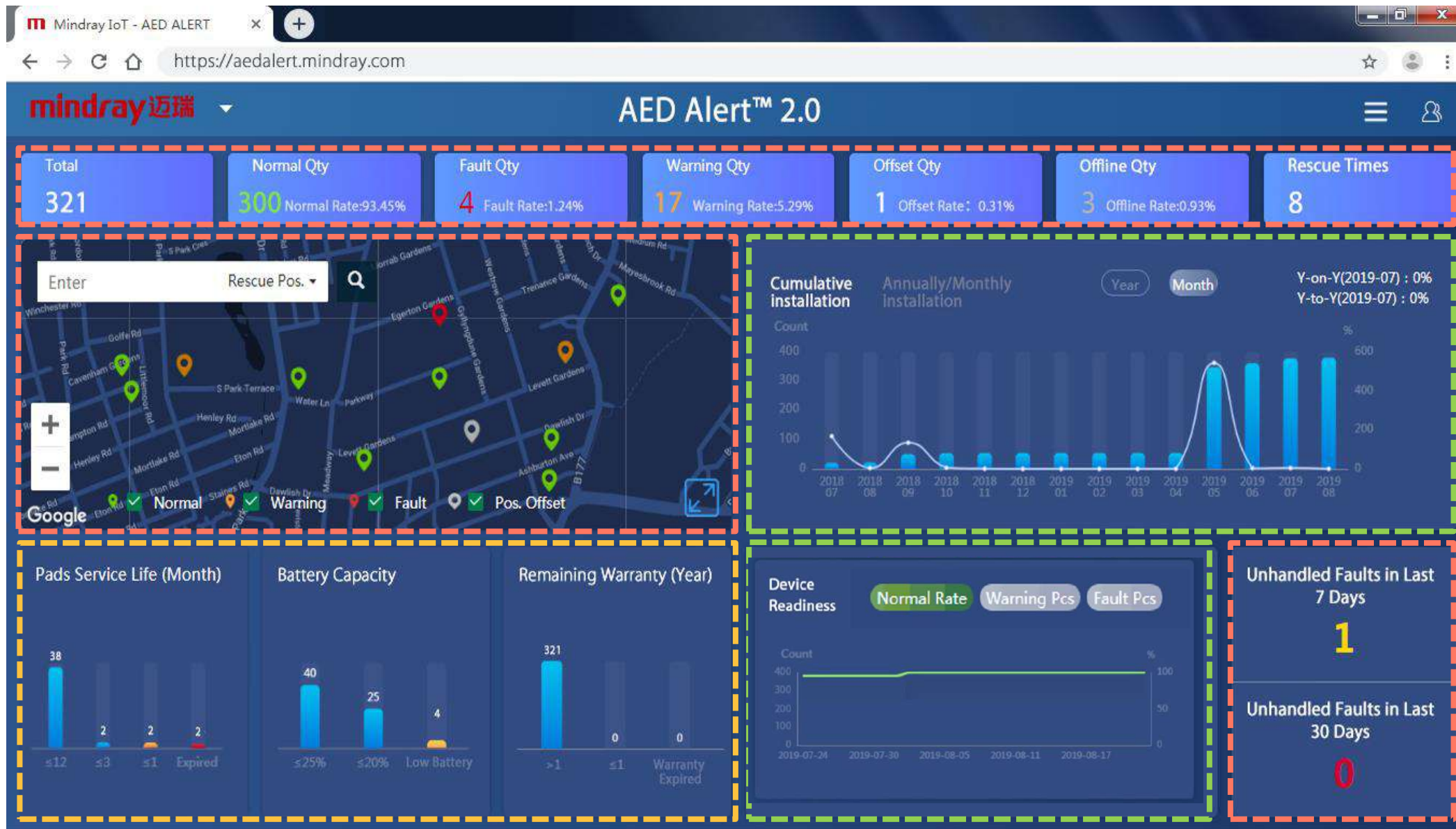

Completa visibilità di tutti gli apparecchi

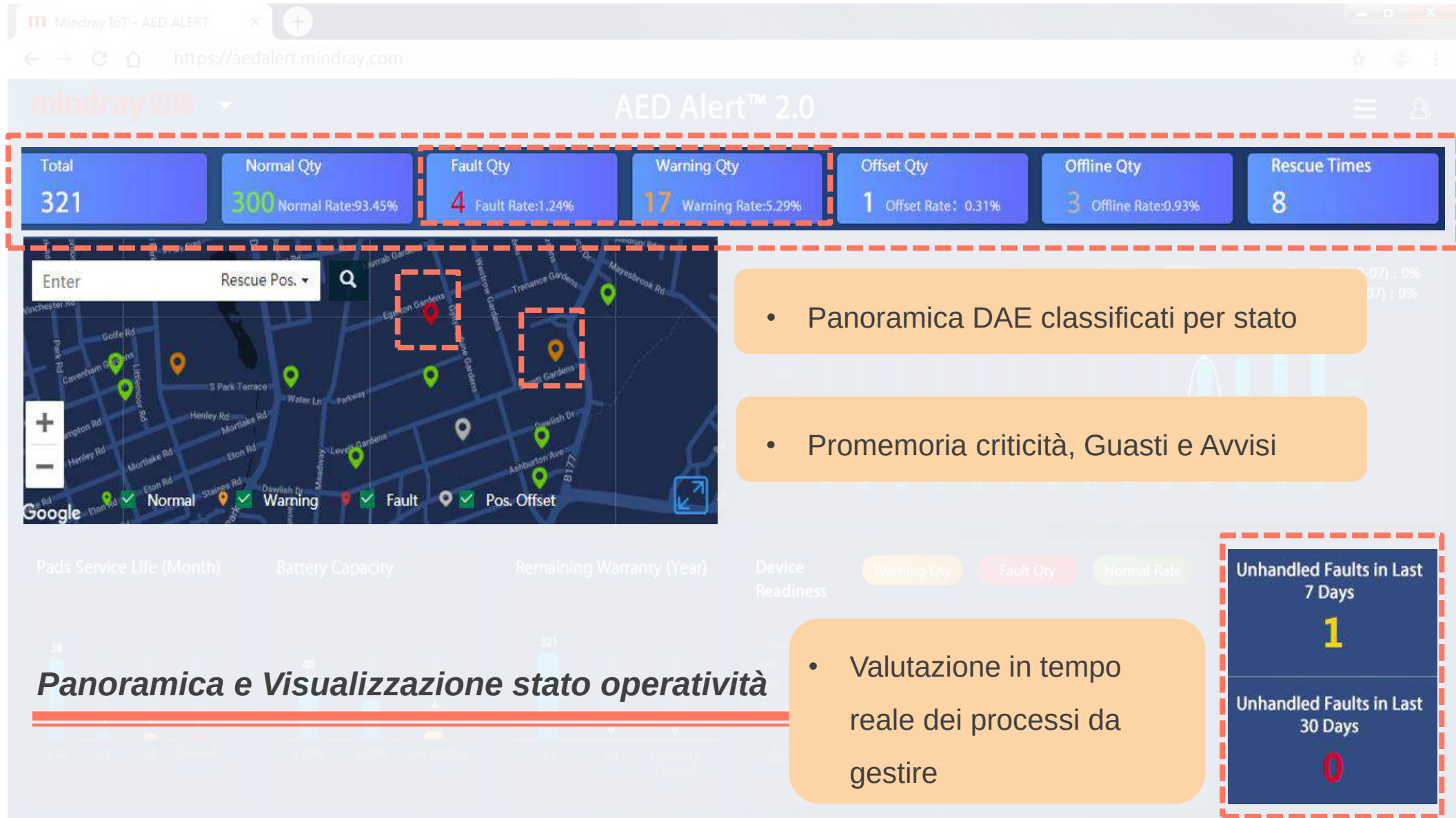

Completa visibilità di tutti gli apparecchi

Allarmi accessori e garanzia organizzati per priorità



Completa visibilità di tutti gli apparecchi

Allarmi accessori e garanzia organizzati per priorità



Scadenza elettrodi

Capacità batteria

Garanzia

Completa visibilità di tutti gli apparecchi



Completa visibilità di tutti gli apparecchi

Statistiche per riesame periodico



Grafico 1 anno/1 mese andamento installazioni

Inventario annual e riferimento per future investimenti



Grafico 1 mese andamento stato operatività


Verifica statistica dello stato di operatività della rete

Sommario

- 1 Informazioni dettagliate di ogni apparecchio
- 2 Visibilità completa di tutti gli apparecchi
- 3 Comunicazione 4G con tecnologia IoT
- 4 Soluzione sicura



DAE connesso con tecnologia IoT

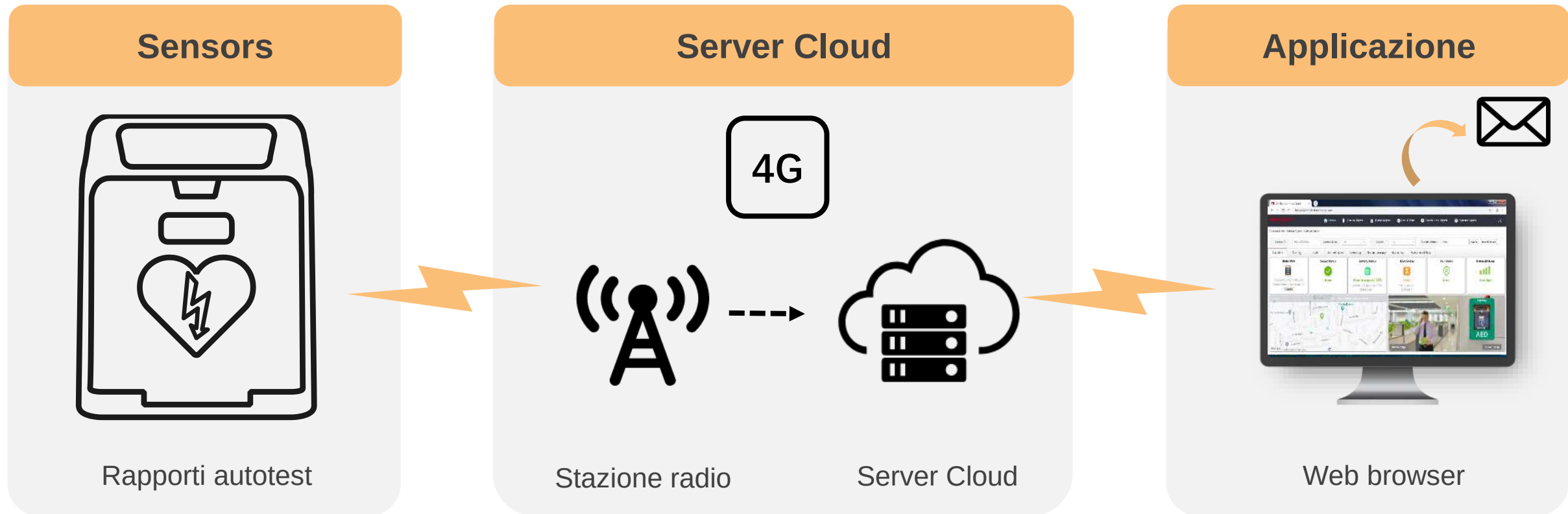

**Disponibile anche con connessione Wi-Fi*

Copertura estesa




Il Server Cloud server non
nessita di storage locale



Ampia copertura del segnale 4G



Possono essere connessi
un numero illimitato di DAE

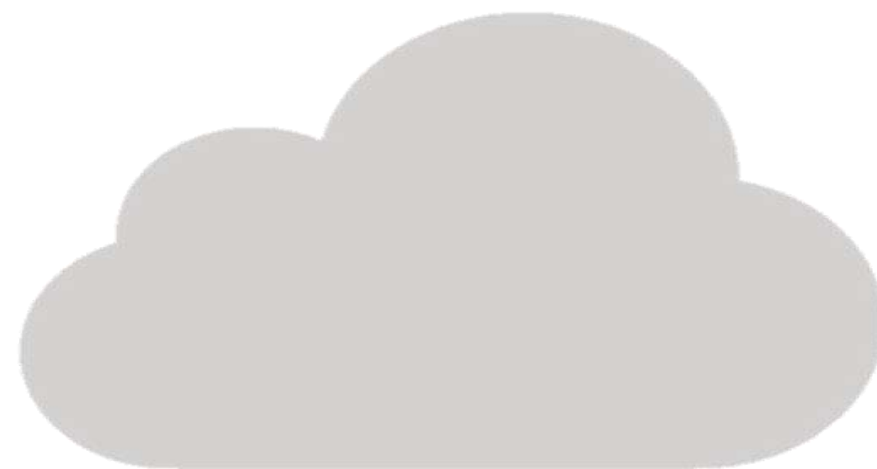


Accesso flessibile

Accesso flessibile web



PC / laptop

Ovunque ed in qualsiasi momento

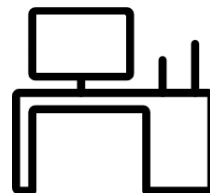

Al terminale



In mobilità




Sempre

Sommario

- 1 Informazioni dettagliate di ogni apparecchio
- 2 Completa visibilità di tutti gli apparecchi
- 3 Comunicazione 4G con tecnologia IoT
- 4 Soluzione sicura



Trasmissione dati stabile e sicura

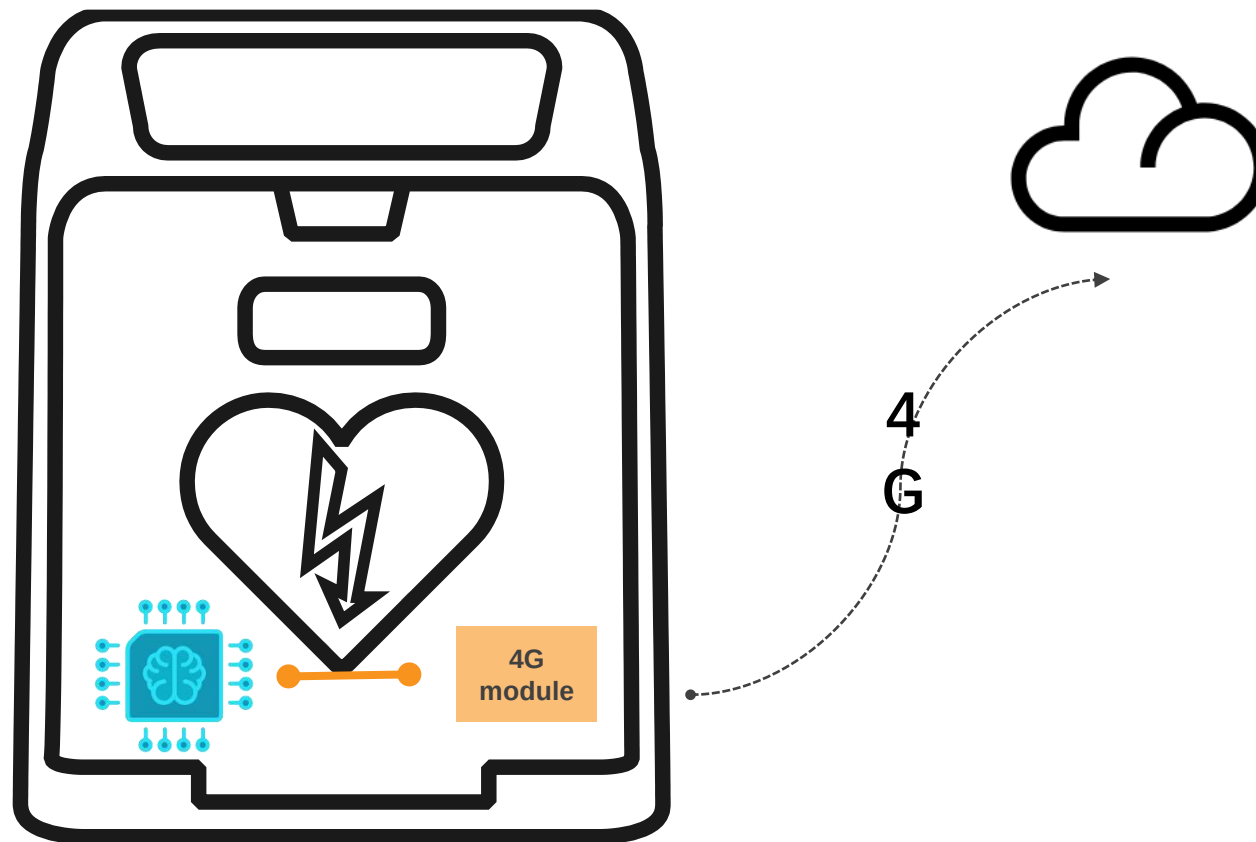

Modulo integrato ad alta compatibilità per garantire una trasmissione stabile e sicura

Garanzia di sicurezza ed efficienza del data storage




Network firewalls



Crittografia dati



CloudWatch

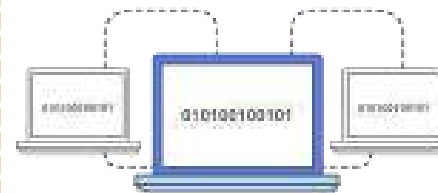

Conformità GDPR



Came into force by
May 25th, 2018

Le norme **più severe**
per proteggere le informazioni

Sommario

1 Informazioni dettagliate di ogni DAE

- Stato operativo
- Controllo durata degli accessori
- Allarme posizione
- Allarme e dati di soccorso
- Gestione gruppi misti di DAE

3 Trasmissione 4G con tecnologia IoT

- DAE connessi con IoT
- Copertura estesa
- Accesso flessibile

AED-Alert™ 2.0

2 Visibilità completa di tutti i DAE

- Panoramica e Visualizzazione stato operatività
- Allarmi accessori organizzati per priorità
- Statistiche per riesame periodico

4 Soluzione sicura

- Modulo 4G integrato
- Cloud Server
- Conformità GDPR



GRAZIE!

mindray
healthcare within reach

